



**Masque en tissu à l'intention du grand public dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19**

## DESCRIPTION

2 couches - Tissu 100% Polyester  
2 couches - Non tissé 100% Polyester

Lavable (40 lavages)

3 plis

Fixation auriculaire élastique

Pince-nez ajustable

Antibactérien

TESTS	RESULTATS	LABORATOIRE
Filtration bactérienne	94% Après 10 lavages	AITEX
Filtration à particules	99%	IFTH
Respirabilité > 96 L.m-2.S-1	553 Après 40 lavages	IFTH
Résistance aux éclaboussures	Aucune dégradation après 32 tests	AITEX
Bioburden < = 30 CFU/g	OK	SAGILAB

Les masques évitent la propagation des particules émises par la personne qui le porte (salives, mucus, etc.) vers l'environnement ou les personnes qui les entourent. Les masques protègent également les personnes qui le portent des éjections de sang et/ou fluides corporels.

## INSTRUCTION D'UTILISATION



Se laver les mains avant de mettre le masque et avant de l'enlever

Après utilisation, laisser le masque porté loin de tout vêtement ou autre objet afin d'éviter toute contamination

Laver le masque à la machine à 60°C pendant 30min minimum

Ne doit être porté que lorsqu'il est totalement sec - séchage au sèche-linge possible

Stérilisation possible à 134°C max pendant 3 min

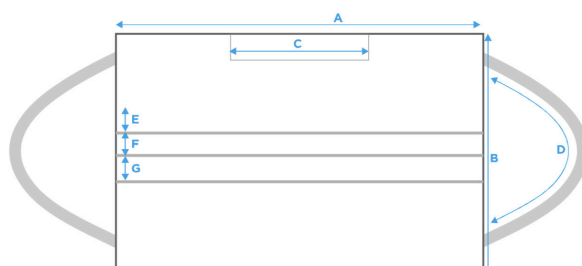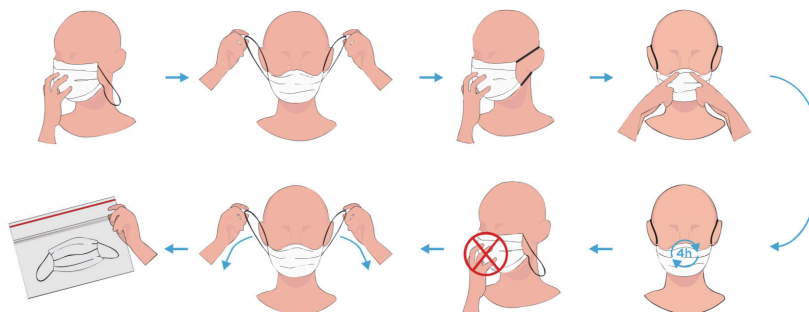

**A** Largeur 17 cm  
**B** Hauteur 10 cm  
**C** Réglage nez 8,5 cm  
**E/F/G** Hauteur de pli 1 cm  
**D** Élastique 18 cm